



# GÉZATONE

ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ  
УХОДА ЗА ЛИЦОМ

**V-Line** модель m1603

---

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## ВВЕДЕНИЕ

Прежде всего, благодарим вас за выбор этого продукта.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом эксплуатации и сохраните его для последующего использования.

Раздел "Меры безопасности" следует прочитать особенно внимательно, чтобы обеспечить безопасность во время использования прибора.

## ОПИСАНИЕ МЕТОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ

Естественный процесс снижения синтеза коллагена начинается уже в 25 лет, его ускорению способствуют такие факторы, как стрессы, неблагоприятная экологическая обстановка, нарушенный режим питания (несбалансированная диета), хроническая усталость, солнечная радиация, курение и другие вредные привычки, нарушение режима сна, что, в конечном результате приводит к потере кожей упругости, тонуса и появлению морщин.

До недавнего времени воздействие на глубокие слои кожи возможно было осуществить с использованием мезотерапии, что в свою очередь, является болезненным, и, к тому же, может травмировать поверхностные слои кожи; или профессиональными аппаратами, использующими большое количество энергии, и применяющимися в условиях салонов и клиник, что часто недоступно по причине нехватки времени или финансовых возможностей. Аппарат для домашнего RF-лифтинга Gezatone «V-Line», модель m1603 позволит Вам проводить профессиональные программы 3D омоложения, не выходя из дома!

Использование программы 3D омоложения, основанной на RF-лифтинге в косметических целях, можно назвать революционным прорывом в современной эстетической практике, поскольку данный метод позволяет воздействовать на глубокие слои кожи, стимулируя производство коллагена и других элементов дермы, отвечающих за молодость кожи. Используемые аппаратом Gezatone «V-Line», модель m1603 частоты оказывают действие непосредственно на соединительную ткань, делая её более молодой, компактной и плотной. Кроме того, это воздействие приводит к изменению свойств белков соединительной ткани (в частности, коллагена), а также усиливает производство коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, что приводит к восстановлению тонуса, тургора и упругости кожи.

В современной косметологической практике данный метод называют безоперационным омоложением кожи. Тепло и усиление периферического кровообращения стимулирует насыщение обрабатываемых тканей кислородом и питательными веществами, что, в свою очередь, приводит к усилению метаболической активности клеток, стимуляции синтеза необходимых для поддержания молодого состояния кожи веществ.

Радиочастоты оказывают действие на поляризованные клетки

(например, клетки жировой ткани). Посредством передачи энергии жировым клеткам, удерживающим воду, радиоволны вызывают вибрацию с частотой примерно 1млн. колебаний в секунду, что приводит к клеточной биоактивации. Колеблущееся поле вызывает движение ионов, что приводит к интенсивному выведению жидкости в лимфатическую систему вместе с токсинами и шлаками. Более того, радиочастотный разогрев тканей примерно до 40°C приводит к активизации микроциркуляции, что способствует выведению избыточной жидкости из тканей. Таким образом, происходит уменьшение объемов жировой ткани, а также, за счет биохимического изменения в жировых клетках, создаются условия, препятствующие повторному накоплению жира.

Использование аппарата обеспечивает общее омоложение кожи, уменьшение объема жировой массы, активному выведению избыточной жидкости. Длительное сохранение эффектов достигается, прежде всего, благодаря клеточной биоактивации.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА GEZATONE «V-LINE» M1603!

- Коррекция морщин, разглаживание рельефа кожи.
- Восстановление структурного каркаса лица благодаря производству новых волокон коллагена и эластина.
- Восстановление нормальной работы сосудов, что приводит к улучшению тона кожи.
- Усиление действия косметических средств.
- Восстановление функций кожи на клеточном уровне.

## ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


1. Излучатель RF

2. Кнопка питания

3. Разъем

4. Пылезащитная заглушка

5. Защитная крышка излучателя

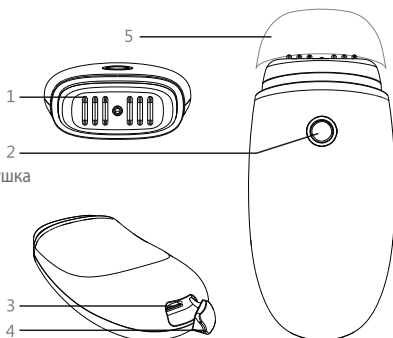

## ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ

1. Перед первым применением рекомендуется полностью зарядить аккумуляторную батарею прибора.
2. Когда батарея разрядилась, подключите зарядное устройство к стандартной розетке с переменным током.
3. Во время зарядки индикатор будет гореть красным светом, после того, как батарея будет полностью заряжена, индикатор станет зеленым.
4. Рекомендуется время от времени заряжать батарею, даже если Вы не пользуетесь прибором долгое время. Это продлит срок службы батареи.
5. После завершения зарядки отключите зарядное устройство от источника питания.

## ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. Зарядите прибор
2. Очистите лицо от макияжа и загрязнений
3. Снимите все металлические украшения: серьги, цепочки, пирсинг.
4. Нанесите специальный гель для процедуры RF-лифтинга на участок кожи, на котором будет проводиться воздействие (гель в комплект не входит и приобретается отдельно).

ПРИМЕЧАНИЕ: Обрабатываемую поверхность лица рекомендуется разделить на 5 участков (см. стр. 6-7). Каждый участок обрабатывается отдельно, до достижения необходимой температуры.

5. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку и удерживайте в течение 3-х секунд, пока не услышите трехкратный звуковой сигнал. Если включенным прибором не пользоваться, то через 30 минут он автоматически выключится с трехкратным звуковым сигналом. Для достижения необоримого результата процедуру следует проводить не менее 3-х минут на каждом участке.

6. Расположите прибор на обрабатываемом участке (площадь участка должна быть порядка 10 см<sup>2</sup>) и медленно водите им по направлению от центра к периферии, снизу вверх. В случае повышения температуры свыше 42°C индикатор заморгает оранжевым цветом. Если вы ощущаете достаточный прогрев не дожидайтесь включения индикатора, переходите к следующему участку.

7. При температуре 45°C индикатор станет красным.

Перейдите на следующий участок и т.д.

Не удерживайте прибор на одном месте без движения более 3-х секунд. После обработки одного участка в течении 3-х минут переходите на следующий.

8. Удалите остатки геля с лица и нанесите восстанавливающий крем после процедур RF-лифтинга (не входит в комплект и приобретается отдельно), это успокоит кожу и повысит эффективность воздействия.

9. Очистите прибор от остатков геля и уберите в место хранения.

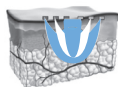


Схема воздействия  
на кожу



Схема массажных линий

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА РАЗНЫЕ УЧАСТКИ ЛИЦА

### ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛИЦО

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Внимание | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ограничения при использовании: Один раз в день на каждый отдельный участок (не превышая 3 минут). Ни в коем случае при использовании не превышайте вышеуказанное время.</li><li>• Ни в коем случае не направляйте прибор к середине горла, избегайте области вокруг глаз и непосредственно глаза.</li><li>• Ни в коем случае не направляйте прибор на лоб и не используйте его на голове.</li><li>• Ни в коем случае не направляйте прибор на локти и колени и не используйте его на других суставах.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ОЖИДАЕМЫЙ НЕМЕДЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ

Вы должны почувствовать тепло в областях обработки немедленно после окончания процедуры. Ваша кожа будет ощущаться более тугой, гладкой и посвежевшей.

### ОЖИДАЕМЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Кожа будет постепенно улучшаться на протяжении срока до 6-ти месяцев после окончания процедур по мере формирования нового и более здорового коллагена. Большинство пользователей заметят определенное снижение количества морщин. После месяца полного цикла обработки (до 5-ти процедур в неделю), рекомендуется поддерживать эффект с помощью регулярных процедур частотой 2 раза в неделю.

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Так как в процедурах с использованием аппарата Gezatone «V-Line», модель m1603 используется тепло, покраснение кожи и небольшая отечность может появиться на области обработки. Это просто означает, что Вы применили необходимое количество тепла для достижения наилучшего результата. Покраснение и отечность пройдут вскоре после окончания процедуры. Не следует продолжать процедуры, если покраснение и отечность сохраняются свыше 24 часов.

Некоторые другие (редкие) побочные эффекты: боль, повреждение ткани естественной кожи (образование струпьев, волдырей, ожогов) или слабая кожа. Если любые из этих побочных эффектов сохраняются свыше 24 часов, следует прекратить процедуры и обратиться к специалисту.

Индивидуальные результаты зависят от различных факторов, могут отличаться у разных пациентов и не гарантируются производителем.




**ВНИМАНИЕ:** ДАННЫЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МОРЩИН НА ЛБУ И НЕ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ!

#### ПОДБОРОДОК

⇒ Длительность процедуры:  
3 мин.

Расположите прибор горизонтально у середины нижней части подбородка.

Круговыми движениями периодически в 1-2 секунды ведите прибором слева направо и обратно.

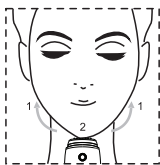

#### ЩЕКИ

⇒ Длительность процедуры:  
3 мин.


Расположите прибор горизонтально у уголка рта.

Двигаясь к скуле, ведите прибором снизу вверх периодически в 1-2 секунды.

Расположите прибор вертикально у уголка рта.

С периодичностью в 1-2 секунды ведите прибором горизонтально от уголка рта к уху.

Ниже показаны 2 участка щек:  
① и ②.

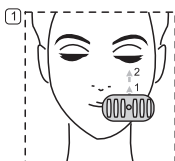

#### ФОРМИРОВАНИЕ КОНТУРОВ ЛИЦА

⇒ Длительность процедуры:  
3 мин.


Приложите прибор к щеке.

Двигаясь к скуле, ведите прибором снизу вверх периодически в 1-2 секунды.



## ОБЩИЙ ПЛАН ТЕРАПИИ ЛИЦА

- Процедуру для лица следует проводить один раз в день, не превышая 3 минут на каждом из 5-ти участков.
- Общая продолжительность процедуры не должна превышать 30 минут.
- При использовании прибора следите, чтобы прибор не оставался неподвижно на одном месте. Медленно водите прибором по лицу.
- С данным прибором необходимо использовать специальный защитный гель для процедур RF-лифтинга.
- После процедуры, по желанию, Вы можете оставить гель на лице или удалить излишки. Рекомендуется также нанести крем восстанавливающий после RF-лифтинга.

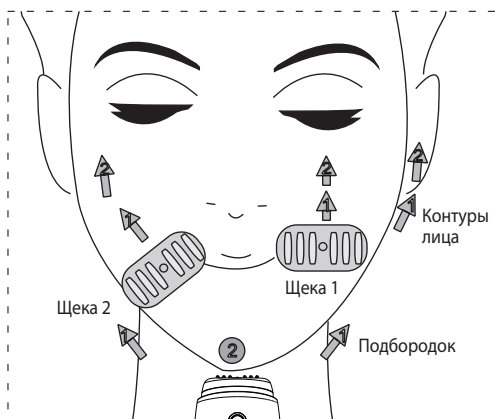

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Просим соблюдать представленные ниже инструкции во избежание травм и повреждения имущества.

|  <b>Опасно</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Запрещено</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это изделие имеет встроенную заряжаемую батарею. Просим не кидать ее в огонь, не заряжать, не использовать и не хранить при высоких температурах. Это может привести к перегреву, пожару или взрыву.</li> </ul> |
|  <b>Предупреждение</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• При чистке прибора необходимо отключить зарядное устройство. Иначе возникает риск поражения электрическим током.</li> </ul>                                                                                     |

|  <b>Предупреждение</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Просим соблюдать</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Во время процедуры необходимо непрерывно передвигать прибор по коже. При несоблюдении рекомендаций на коже могут возникнуть низкотемпературные ожоги.</li> <li>• Для заряда необходимо использовать зарядное устройство, включенное в комплект. При несоблюдении инструкций возникнет риск возникновения пожара в результате короткого замыкания или перегрева.</li> <li>• Немедленно прекратить использование прибора в случае ненормальной или неправильной работы. Если продолжать пользоваться прибором, это вызовет риска пожара, поражения электрическим током и травмы.</li> <li>• Необходимо использовать прибор только с напряжением 220-240 В переменного тока. При несоблюдении инструкций возникнет риск возникновения пожара, поражения электрическим током и ожога.</li> </ul> |
|  <b>Запрещено к использованию во влажных помещениях.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не используйте прибор во влажных помещениях, таких как ванная. Имеется риск возникновения пожара, поражения электрическим током и травм.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <b>Не трогать мокрыми руками.</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не отключайте зарядное устройство мокрыми руками. Имеется риск поражения электрическим током.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>Не погружать в воду</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не трогайте прибор и зарядное устройство мокрыми руками. Не погружайте эти изделия в воду и не мойте их в воде. Имеется риск поражения электрическим током и может привести к поломке прибора.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Не разбирать</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не вносите изменения в конструкцию прибора, никогда не пытайтесь его разбирать и ремонтировать самостоятельно. Имеется риск пожара, поражения электрическим током и травмы. Если необходимо техническое обслуживание (как например замена батареи), необходимо проконсультироваться с продавцом, у которого был куплен этот прибор.</li> </ul>                                                       |
|  <p>Запрещено</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Никогда не пользуйтесь прибором в других целях, кроме косметических.</li> <li>• Этот изделие является прибором для домашних косметического ухода за кожей. Поэтому, не используйте его в иных целях, кроме косметических, и для прочих медицинских или терапевтических целей.</li> <li>• Храните прибор в недоступном для детей месте. Никогда не позволяйте им использовать этот прибор.</li> </ul> |

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Данный прибор не является водонепроницаемым. Не оставляйте прибор в местах, где он может упасть в воду.
2. После процедуры протирайте прибор слегка влажной тканью.
3. Храните прибор в прохладном, сухом месте подальше от влажности.
4. Используйте стандартное зарядное устройство. Не пользуйтесь прибором, если он поврежден.
5. Несмотря на свою прочность, прибор может сломаться, если его уронить или повредить.
6. Заряжайте его, только когда батарея разряжена.
7. После полного заряда батареи отключите от источника питания, не оставляйте зарядное устройство в розетке.
8. Не разбирайте, не ремонтируйте и не вскрывайте прибор самостоятельно.
9. Избегайте легковоспламеняющихся объектов вблизи прибора.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Прибор для домашнего RF-лифтинга следует использовать на здоровой коже. Мы не несем ответственности за какой-либо дискомфорт, вызванный в результате использования этого прибора на нездоровой коже, подвергающейся лечению во время использования.
- Запрещено использование детьми.
- Наличие кардиостимулятора или иных электронных имплантатов.
- Беременность, период лактации.
- Пациенты с острой формой заболеваний: туберкулез, лихорадка, инфекционные заболевания, болезни, передаваемые контактным путем.
- Люди с заболеваниями сердца.
- При наличии шрамов.
- Люди с глазными болезнями или проходящие лечение от глазных болезней.
- Люди с кожными болезнями, аллергическим дерматитом и с чувствительной кожей.
- Купероз (сетка сосудов на лице).
- При покраснении и шелушении кожи, вызванном чрезмерным загаром.
- При наличии угревой сыпи и гнойничковых воспалительных процессов на коже.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Признаки                                                 | Возможные причины                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается                                     | Нет заряда                                                  |
|                                                          | Кнопка включения была слабо нажата, не до конца.            |
|                                                          | Сухая кожа.                                                 |
| Температура не повышается                                | Элемент подачи радиочастот не плотно соприкасается с кожей. |
| Чрезмерное нагревание кожи                               | Процедура длится более 3 минут на одном и том же участке.   |
|                                                          | Не нанесен специальный защитный гель.                       |
| Работает всего несколько минут после зарядки устройства. | Недостаточно заряжен аккумулятор.                           |
|                                                          | Срок службы аккумулятора истек.                             |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Основное устройство                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Наименование изделия                                                                                         | Прибор для домашнего RF-лифтинга        |
| Модель №                                                                                                     | m1603                                   |
| Размеры                                                                                                      | 120*57*29 мм                            |
| Частота колебаний (RF)                                                                                       | 1 МГц                                   |
| Допустимая влажность воздуха                                                                                 | 10...70 %                               |
| Допустимая темп-ра ок. среды                                                                                 | 15...30 °C                              |
| Зарядное устройство                                                                                          |                                         |
| Блок питания                                                                                                 | Переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц      |
| Выходное напряжение/ Ток                                                                                     | Переменный ток 5 В/1 А                  |
| Длина кабеля USB                                                                                             | Около 90 см                             |
| Аккумулятор                                                                                                  |                                         |
| Номинальное напряжение                                                                                       | 3,7 В/900 мА                            |
| Используемая батарея                                                                                         | Литиево-ионный аккумулятор              |
| Время зарядки                                                                                                | Около 1-2 часа                          |
| Максимальное время использования при полном заряде батареи                                                   | Можно использовать 30 мин. без перерыва |
| Комплектация                                                                                                 |                                         |
| Прибор для домашнего RF-лифтинга x1<br>Зарядное устройство x1 / Руководство пользователя x1 / кабель питания |                                         |

# GÉZATONE



НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ