

MARUTAKA

Salvador

Аппарат для очищения и
омоложения лица



Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию,
прежде чем использовать аппарат

Описание продукта

Marutaka Salvador - косметический аппарат для RF-лифтинга и EMS-стимуляции мышц с 5 функциями:

RF + EMS + вибрация + очищение + красный свет.

Прибор управляется двумя кнопками, оснащен одной манипулой для ухода за кожей, одной съемной силиконовой насадкой и подставкой.

Функции

Прибор предназначен для очищения, увлажнения кожи лица и обогащения ее питательными веществами.

Вы можете выбрать разную интенсивность RF- и EMS-воздействия и вибрации в зависимости от ваших потребностей.

Прибор предназначен для домашнего использования.

• RF-лифтинг

За счет прогрева подкожного слоя дермы помогает предотвратить преждевременное старение кожи, уменьшает выраженность морщин и других несовершенств.

• Силиконовая щеточка для очищения

Удаляет остатки дневных загрязнений, косметических средств и себума с помощью мягкой вибрации.

• Регулировка интенсивности

Вы можете выбрать подходящий для вас уровень интенсивности вибрации для оптимального RF- и EMS-воздействия.

В прибор встроено три режима RF- и EMS-воздействия.



• Красный светодиодный свет

Снижает реактивность кожи, уменьшает воспаления и борется с пигментацией.

• Микротоки EMS

Глубоко стимулируют мышцы лица, борются с признаками преждевременного старения.

Описание продукта

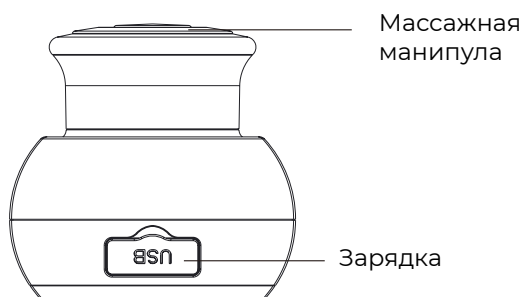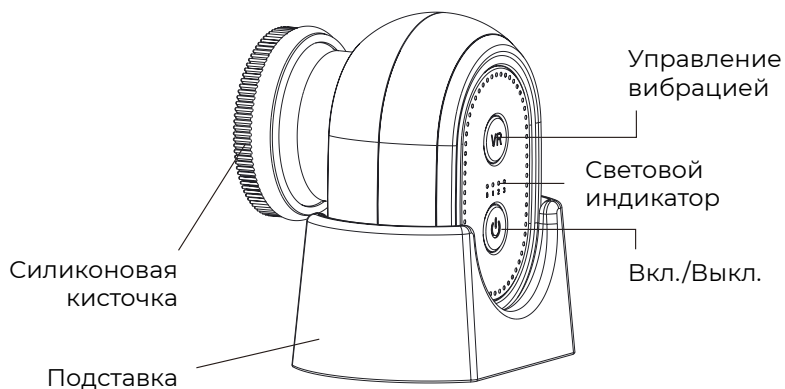

Инструкция по использованию

Внимание! При работе с функциями RF/EMS манипула нагревается! Пожалуйста, перед первым применением прибора проверьте рукой температуру манипулы и отрегулируйте ее до комфортного для вас уровня, чтобы не повредить кожу.

Аппарат имеет две кнопки ☺☺

☺ - переключатель питания, переключатель RF/EMS и их интенсивности.

☺ - управляет переключателем и интенсивностью вибрации

1) Нажмите и удерживайте ☺, чтобы включить прибор. При этом включается вибрация. Начальный уровень вибрации - низкий. RF/EMS выключены.

2) Короткое нажатие ☺ включает RF/EMS. RF/EMS будет находиться на низком уровне интенсивности. Индикатор красного света включен.

3) Еще одно короткое нажатие на ☺ - переключение RF/EMS на средний уровень интенсивности. Индикатор красного света включен.

4) Следующее короткое нажатие на ☺ переключение на высокий уровень RF/EMS. Индикатор красного света включен.

5) Короткое нажатие ☺ - выключение режима RF/EMS. Индикатор красного света выключен.

Повторите шаги 2–5 для еще одного цикла ухода за кожей

6) После включения аппарата в соответствии с шагом 1, вибрация будет на низкой интенсивности. Короткое нажатие на ☺ переключит вибрацию на средний уровень интенсивности.

7) Короткое нажатие на ☺ переключит вибрацию на высокий уровень интенсивности.

8) Короткое нажатие на ☺ в четвертый раз выключит вибрацию. Повторите шаги 6–8, в случае необходимости регулировки вибрации.

9) В любом режиме нажмите и удерживайте ☺, чтобы выключить прибор.

Автоматическое отключение и тональный сигнал

1) Прибор подает звуковой сигнал в случае, если остается без работы в течение 10 секунд, после выключается.

2) При низком, недостаточном для работы прибора уровне заряда батареи индикатор питания начинает мигать, и вскоре прибор выключается.

3) Каждую 1 минуту использования прибор издает звуковой сигнал, указывающий, что вы можете сменить область массажа.

Как пользоваться:

Не используйте прибор во время зарядки батареи. Зарядка батареи производится с помощью USB-кабеля. Вытащите силиконовую заглушку в нижней части прибора, а затем подключите USB-кабель к источнику питания. Поместите прибор на подставку и подождите, пока индикатор заряда не загорится.

Емкость аккумулятора составляет 1100 мАч. Адаптер: 5В/1А.
Время зарядки: 2 часа.

- Время работы прибора после зарядки батареи зависит от Установленной вами интенсивности вибрации.
- Красный индикатор блока питания во время зарядки мигает. При полной зарядке красный свет погаснет.
- Используйте прибор после полной зарядки аккумулятора, это защитит батарею.
- Пожалуйста, заряжайте аккумулятор при комнатной температуре.
- Не используйте обычные зарядные устройства или шнуры.
- После завершения зарядки отключите питание и зарядный кабель.
- Если планируете не использовать прибор в течение длительного времени, для сохранения заряда батареи сначала полностью зарядите батарею, а затем дайте возможность прибору остыть.

Советы по использованию

1. Функция очищения

Силиконовая головка щетки применяется для чистки лица и может использоваться со средством для очищения лица. Включите режим чистки лица и отрегулируйте интенсивность в соответствии с индивидуальными потребностями. Очищайте кожу лица круговыми движениями.

2. Функции RF/EMS

Снимите силиконовую щетку. Включите функцию RF/EMS и отрегулируйте уровень воздействия. Массируйте кожу после нанесения anti-age эмульсии Treatment Reinforce.

- 1) Убедитесь, что поверхность манипулы полностью прилегает к коже при использовании.
- 2) Продолжайте делать вращательные массажные движения. Не держите манипулу на одном участке лица, чтобы не повредить кожу.
- 3) Избегайте области глаз и щитовидной железы.

Чистка и уход за изделием

- 1) Прибор необходимо очищать после каждого использования.
- 2) Не очищайте поверхность манипулы щелочным растворителем, спиртом, разбавителем, бензином и т. д.
- 3) Влагу за пределами поверхности электрода необходимо протирать сухой тканью.
- 4) Храните прибор вдали от источников тепла и влаги. Избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей.

Предупреждение о безопасности

Не рекомендуется использовать прибор в следующих ситуациях:

- 1) При кожных заболеваниях и при воспалениях кожи.
- 2) На поврежденной коже. Используйте прибор только после заживления повреждений.
- 3) С осторожностью применяйте при сухой и чувствительной коже.

FAQ

1. Можно использовать прибор без косметического средства?
– Без нанесения специальных средств прибор использовать нельзя.
2. Существуют ли какие-либо требования ко времени и частоте использования?
– Используйте прибор один раз в день, по 3-5 минут. Для достижения лучшего эффекта рекомендуем первые 2 месяца использовать прибор как минимум 5 раз в неделю.
3. Кожа краснеет после использования прибора, это нормально?
— Это нормальное явление, вызванное RF-воздействием.
4. Поверхность RF-электрода нетеплая, прибор исправен?
– Да, исправен. Нагревание не происходит на поверхности электрода.

Меры предосторожности

- 1) Храните прибор в недоступном для детей и домашних животных месте.
 - 2) При любых неприятных ощущениях прекратите использование аппарата.
 - 3) Берегите прибор от ударов и падений.
 - 4) Не разбирайте и не разбирайте прибор.
 - 5) При использовании прибора установите водонепроницаемую резиновую заглушку в зарядный порт, чтобы избежать попадания в него воды и повреждения прибора.
- Используйте и храните прибор при комнатной температуре.

Технические характеристики

Название	Marutaka Salvador
Уровень защиты от воды	IPX5
Аксессуары	Съемная силиконовая щетка,
подставка, кабель для зарядки	5 В / 0,5 А
Размеры, мм	77*72*86
Время зарядки	2 часа
Время работы	1 час
Напряжение	3.7 V
Ток	2.5 A
Мощность	9.25W
Адаптер	5W/1ATип-C
Емкость батареи	1100mAh
Частота РЧ	1MHz

MARUTAKA



marutakaru



marutaka.ru

г. Москва, ул. 2-я Рощинская, 4



+7(495)760-10-60



zakaz@marutaka.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие:

Модель:

Серийный номер:

Гарантийный срок:

Дата покупки:

Место покупки:
