



Благодарим Вас за приобретение
зубной щетки **SonicPulsar CS-262.**

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации
данного устройства. Сохраните это руководство для получения необ-
ходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по экс-
плуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения:
проставления печати продавца и даты продажи.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение:
Указывает на потенциально опасную ситуацию, разви-
тие которой может привести к серьезной травме.

- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед исполь-
зованием устройства, если к Вам относится что-либо из ни-
жеследующего:
 - чувствительные зубы или десны;
 - недавно перенесенная периодонтальная или стоматологи-
ческая хирургическая операция;
 - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ро-
товой полости.

- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь
со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кро-
воточивость десен после недели пользования данной зубной
щеткой.

- Считается, что абразивные вещества, содержащиеся в зуб-
ной пасте для удаления пятен от табака или отбеливания
зубов, могут серьезно повредить эмаль в случае их продол-
жительного использования. Проконсультируйтесь со своим
стоматологом перед тем, как начать использование зубных
паст с повышенным содержанием абразивных веществ.

- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство
самостоятельно.

- Храните щетку в недоступном для детей месте.

- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых
солнечных лучей.

- Дети должны использовать зубную щетку только под при-
смотром взрослых.

Внимание:
Указывает на потенциально опасную ситуацию, разви-
тие которой может привести к незначительной травме,
травме средней тяжести или порче имущества.

- Данное устройство предназначено только для ухода за по-
лостью рта человека в домашних условиях.

- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна
использоваться индивидуально.

- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком
сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми
детальями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в
течение продолжительного времени.


- Не используйте элементы питания, не указанные для дан-
ного устройства. Вставляйте элементы питания, соблюдая
полярность.

- Извлеките элементы питания из зубной щетки, если Вы не со-
бираетесь пользоваться ею в течение длительного времени
(от трех и более месяцев).

- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не
подвергайте сильному ударному воздействию.

- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы
не повредить поверхность кнопки.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

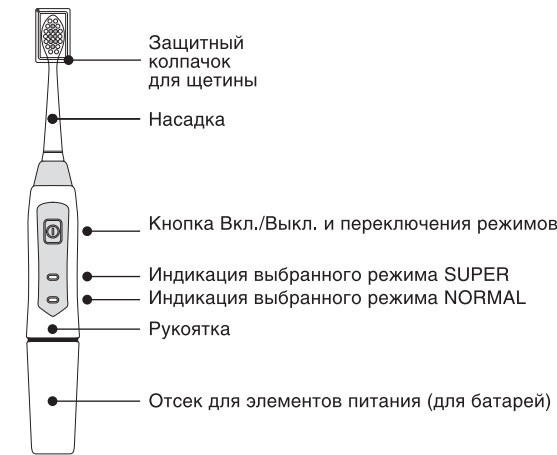


Дополнительно можно приобрести:
Насадки CS Medica SP-21 для электрических звуковых зубных
щеток CS-262 и CS-233-uv (В комплекте 2 насадки).

3. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Поверните крышку отсека для элементов питания против
часовой стрелки и снимите ее.




- Установите две алкалиновые (щелочные) батареи типа
AA таким образом, чтобы положительные (+) и отрица-
тельные (-) контакты совпадали с полярностью, указан-
ной в отсеке для элементов питания.

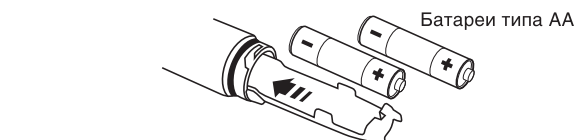

Примечание:
Перед тем как вставлять батареи, насухо вытрите руки и
корпус зубной щетки.

- Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке. По-
ворачивайте крышку до тех пор, пока знаки «точка» и
«тире» не совместятся на обратной стороне рукоятки.

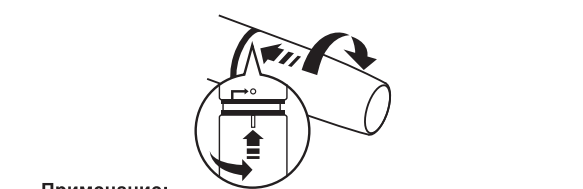

Примечание:
Если отсек для элементов питания закрыт неплотно, в
корпус устройства может попасть вода и вызвать наруше-
ния в работе зубной щетки.


- Срок службы элементов питания зависит от их модели, време-
ни использования, силы, прилагаемой во время чистки, и иных
факторов. Замените батареи, когда движения щетки станут
более слабыми.

- Время работы от одного комплекта алкалиновых (щелочных)
батарей составляет около 150 дней при условии, что щетка ис-
пользуется 2 раза в день по 2 минуты. Так как прилагаемые ба-
тареи рассчитаны для демонстрационных целей, они могут
проработать менее 150 дней.

- Рекомендуем использовать алкалиновые (щелочные) элементы
питания типа AA.

4. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

- Установите насадку на рукоятку, как показано на рисун-
ке (1).
- Аккуратно поверните ее по часовой стрелке до фикса-
ции, как показано на рисунке (2).

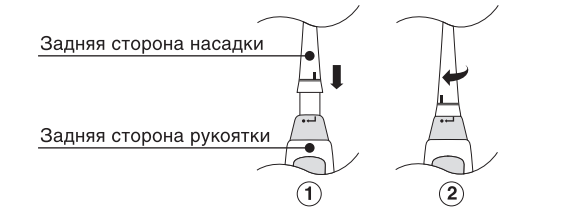

Фиксация насадки происходит в момент совмещения отметок
«тире» на задней стороне насадки и «точка» на задней сторо-
не рукоятки.

Для того чтобы снять насадку, необходимо проделать те же
действия в обратном порядке.

Примечание:
Не прилагайте излишних усилий и не пытайтесь повернуть на-
садку за обозначение на рукоятке. Это может привести к пов-
реждению устройства.


5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Смочите щетку водой и выдавите на нее немного зубной
пасты. После этого введите щетку в ротовую полость.

Примечание:
Чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты, включай-
те и выключайте зубную щетку только при ее нахождении во рту.

- Включите питание, нажав на кнопку.
Головка щетки начинает вибрировать. Аккуратно касайтесь
зубов и десен щетинками, медленно перемещая головку
щетки по зубам в горизонтальном направлении, последова-
тельно проводя чистку всей поверхности зубов.

- Нажатием на кнопку Вы можете выбрать один из двух ре-
жимов чистки. Выберите наиболее подходящий в данный
момент режим.

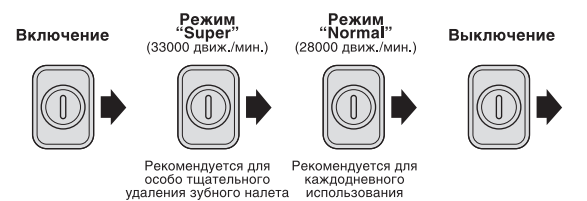


Примечание:
Текущий режим чистки можно определить визуально по
соответствующему индикатору на рукоятке щетки.

Автоматическое отключение через 2 минуты
Щетка отключается через 2 минуты. При необходимости Вы
можете продолжить чистку, снова включив питание щетки.

Промежуточный таймер каждые 30 секунд
Щетка делает на мгновение паузу каждые 30 секунд, что со-
ориентирует Вас на равномерную очистку всех участков по-
лости рта.

Правильная чистка зубов:

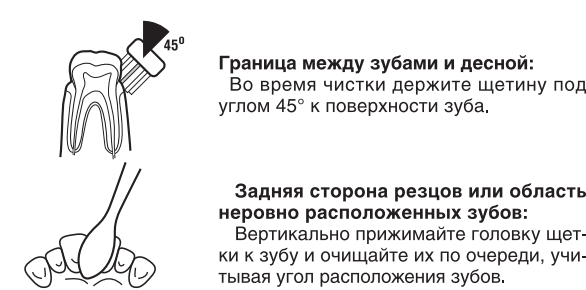

- Завершив чистку зубов, не вынимая щетку изо рта, наж-
мите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы выключить зубную щетку.

- Промойте головку щетки под проточной водой. Аккуратно
стряхните излишек воды.

- Если требуется, установите защитный колпачок на го-
ловку щетки.

6. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Держите зубную щетку в чистоте.

- Удаляйте загрязнения с корпуса щетки мягкой сухой тканью.
При необходимости смачивайте ткань в воде или мягком мо-
ющем средстве. Загрязненную поверхность также можно
смочить водой, а затем протереть тканью.

- Несмотря на то, что щетка является водонепроницаемой, не
погружайте ее в воду на длительное время.

- Не используйте для очистки летучие органические соеди-
нения, такие как бензин и растворитель. Это может испортить
нанесенную краску или привести к повреждению устройства.

- После каждого использования промывайте щетину водой.

- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не
подвергайте сильному ударному воздействию.

- Храните щетку в недоступном для детей месте.

- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых
солнечных лучей.

- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая звуковая зубная щетка
Модель	CS Medica SonicPulsar CS-262
Потребляемая мощность	0,72 Вт
Источник питания	2 алкалиновых (щелочных) элемента питания типа AA
Время работы от двух элементов питания	Около 150 дней (при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты)
Частота колебаний при разных режимах работы	NORMAL: 28000 движ./мин. SUPER: 33000 движ./мин.
Рабочая температура / относительная влажность	0-50°C /30-85%
Температура / относительная влажность при хранении	-20-60°C /10-95%
Масса	45 г
Габаритные размеры	26 (диаметр) x 227 (высота) мм
Срок службы	Рукоятка - 4 года. Насадка - 3 месяца. Элементы питания - устанавливаются производителем этих элементов
Комплект поставки	Рукоятка с насадкой, дополнительная насадка, защитный колпачок для щетины, два алкалиновых элемента питания типа AA, руководство по эксплуатации с гаран- тийным талоном

IPX7 Степень защиты корпуса зубной щетки от проникновения твердых
предметов и воды

EAC Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза

